

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАССАЖЕР ИМПУЛЬСНЫЙ ДЛЯ МЫШЦ ЛИЦА И ШЕИ ЭМИ-01 (КЛЕО)

Паспорт

1. Назначение изделия

1.1 Электронный импульсный массажер для тренировки мышц лица и шеи ЭМИ-01 Клео предназначен для применения в косметологических кабинетах или индивидуально в домашних условиях.

2. Основные технические характеристики

2.1 ЭМИ-01 формирует пачки низкочастотных электрических импульсов с параметрами:

- 1) максимальный размах амплитуды составляет (55 ± 5) В;
- 2) длительность пачки импульсов составляет $(7,5 \pm 0,5)$ мс;
- 3) период повторения пачки импульсов составляет $(15,5 \pm 0,5)$ мс;
- 4) период следования импульсов заполнения пачки составляет $(122,0 \pm 3,0)$ мкс;
- 5) время воздействия и длительность паузы составляют, соответственно, $(4,0 \pm 0,2)$ с.

2.2 Электропитание ЭМИ-01 может осуществляться как от встроенного гальванического элемента питания (батарейки типа «Крона») напряжением 9,0 В, так и от внешнего источника питания ИП-01.

3. Комплектность

В продажу электромассажер КЛЕО поступает в следующей комплектации:

- 3.1 Аппарат КЛЕО.
- 3.2 Электрогель во флаконе емкостью 30 мл.
- 3.3 Книжка «КЛЕО Электромассажер для лица и шеи». В конце книжки находится Паспорт электромассажера.
- 3.4 Коробка.

Примечание: батарейка типа «Крона» в комплектацию не входит, прилагается для проверки функционирования при продаже.

4. Устройство и принцип работы

4.1 ЭМИ-01 — электронное устройство, размещенное в пластмассовом корпусе. В корпусе находится формирователь пачек импульсов, выход которого подключен к электродам. Electroды попарно закреплены на верхней торцевой части корпуса. В нижней части корпуса имеется батарейный отсек для размещения гальванического элемента питания.

4.2 Включение прибора осуществляется поворотом регулятора уровня воздействия, расположенного на боковой поверхности корпуса. При этом включается светодиод с периодом 1 с на передней панели прибора. Кратковременное нажатие кнопки на передней панели запускает таймер, при этом на электроды подаются электрические импульсы. Подача импульсов прекращается, когда таймер отсчитает (160 ± 2) с, при этом включается звуковой сигнал. Электрические сигналы на электроды не подаются и в том случае, когда кнопка таймера удерживается нажатой.

4.3 При плотном контакте электродов с кожей лица или шеи человека массажер ЭМИ-01 вызывает сокращение мышц во время действия пачки импульсов электрического тока. Во время паузы происходит полное расслабление мышц.

4.4 Светодиод, расположенный на передней панели ЭМИ-01, выключается при разряде гальванического элемента питания (батарейки).

5. Указание мер безопасности

- 5.1 Нельзя электроды прибора погружать в воду.
- 5.2 Если прибор используется с длительными перерывами, батарейку следует извлекать и хранить отдельно от прибора.
- 5.3 Запрещается пользоваться любыми источниками питания (адаптерами), кроме ИП-01, ТУ 9444-006-47278139-03.

6. Подготовка изделия к работе

6.1 Разместить батарейку в электронном блоке. Для этого необходимо снять крышку батарейного отсека, сдвинув ее вниз. Вставить батарейку, соблюдая полярность, и закрыть крышку. Если предполагается питание ЭМИ-01 осуществлять от сети с помощью источника питания ИП-01, то вначале следует подключить вилку к розетке на корпусе ЭМИ-01, а затем включать источник ИП-01 в сеть.

6.2 Включить прибор поворотом регулятора уровня воздействия. Если при этом загорается светодиод, прибор готов к работе.

6.3 Провести дезинфекцию прибора.

6.4 Для дезинфекции необходимо:

- приготовить раствор из 3 % перекиси водорода (ГОСТ 177-88) с добавлением 0,5 % моющего средства (ГОСТ 25644-88) при комнатной температуре;
- провести пятикратную обработку поверхности электронного блока и электродов. Обработка состоит в протираниях обрабатываемой поверхности марлевой салфеткой, смоченной в приготовленных агентах и тщательно отжатой.

6.5 Упражнения проводить в соответствии с разделом «Проведение процедур».

7. Техническое обслуживание, возможные неисправности и способы их устранения

7.1 При длительном перерыве в использовании ЭМИ-01 рекомендуется извлечь гальванический элемент питания из массажера.

7.2 Если при включении ЭМИ-01 не включается светодиод то проверьте надежность подключения элемента питания (батарейки). Если это не помогает, необходимо заменить элемент питания на новый. Если при новом элементе питания светодиод не включается, изделие ЭМИ-01 необходимо отправить изготовителю для ремонта.

7.3 При включенном ЭМИ-01 и нажатой кнопке таймера, расположенной на лицевой панели изделия, не слышен непрерывный звуковой сигнал. Изделие неисправно, его необходимо отправить изготовителю для ремонта.


8. Противопоказания к применению

8.1 Не следует применять ЭМИ-01 (Клео) лицам, которым имплантирован кардиостимулятор.

8.2 Нельзя пользоваться прибором ЭМИ-01 (Клео) при наличии кожных заболеваний, ран, порезов, свежих шрамов на лице или шее, а также при наличии увеличенных желез, нейродермитов.

9. Свидетельство о приемке

Электронный стимулятор ЭМИ-01 заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 9444-005-47278139-09 и признан годным к эксплуатации. Дата изготовления _____ 200__ г.

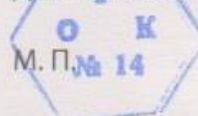

Представитель ОТК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электронный массажер импульсный для мышц лица и шеи ЭМИ-01 (Клео) заводской номер _____ имеет гарантийный срок эксплуатации 12 мес., считая со дня ввода (продажи) его в эксплуатацию.



М.П.

Дата продажи _____ 200__ г.

Продавец _____

Штамп магазина

Адрес для пересылки в ремонт, в том числе, бесплатный
в течение гарантийного срока:
124460, г. Москва, а/я 55, ООО «КИРЛЕНА»

наши телефоны:

~~(499) 720-90-17~~; 8 916 461-60-93

8-800-100-2456 (звонок бесплат. по России)
8-903-163-5641